

床ずれ予防エアマットレス

エアーマスタートライセル



上敷きタイプ

※マットレスは付きません(別売)


中古販売価格 ￥30,000円

(メーカー希望小売価格 ￥134,400円)


背上げ・姿勢保持に対応

■アクティブセル(2層式エアセル)

エアマットのエアセルは体圧分散効果を高めるためには厚みが必要となります。しかし、厚ければ安定感はなくなりマット上での動きやすさや介護のしやすさが半減してしまいます。トライセルの2層式縦長エアセル、「アクティブセル」は上層部の空気が下層部へ流れ、広い面で安定感よく支えることができます。これにより従来製品では実現できなかった高い体圧分散効果と安定感を両立させます。

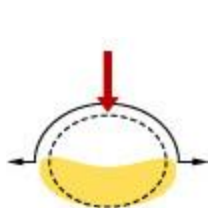

従来のエアセル
(単層式)
潰れやすく底着きしやすい。

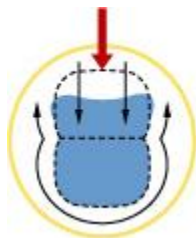


トライセルのエアセル
(2層式)
底着きを回避し、安定性大。




■トリプルシステム

24本のエアセルが3本ワユニツで膨張収縮を繰り返します。常に全体の2/3の面積のエアセルが膨らみ、ご使用者の身体を広く支えるので優れた安定性を実現できます。

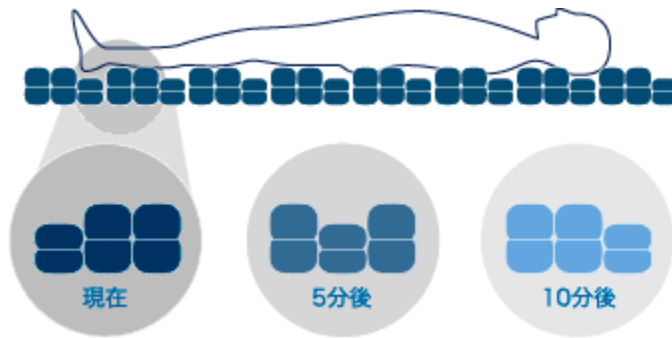

■背上げ(ギャッチアップ)対応機能

ベッド上で起座して食事や点滴を行うなど、長時間の背上げの際、危険となってくる起座での褥瘡予防にも対応した「背上げ対応機能」を採用。ボタンひとつで全てのエアセルが膨らむ静止モードへ移行し、安定感を向上させます。

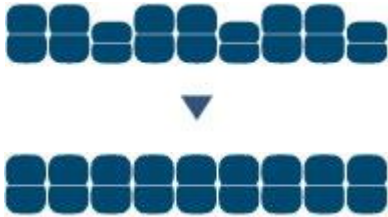


トライセル



従来品

■安定体位保持で姿勢の崩れを防ぐ

背上げ後の姿勢の崩れはズレを発生させます。トライセルの2層式エアセルは上の層が身体の動きに沿ってフレキシブルに変形し、身体を常にやさしくホールドします。

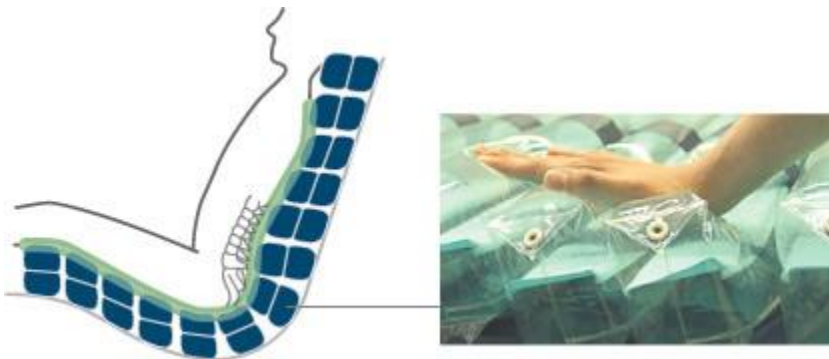

身体に沿ってフレキシブルに変形

スリムボディのエアポンプ

患者さんの体重に設定するだけでマイコンがマット内圧を自動的にコントロール。どなたにでも簡単に適正圧力の管理が出来ます。すべての操作は見やすいタッチパネル。また、フック付きでベッドのフットボードへの取り付けが簡単です。



簡単メンテナンス



専用カバー
開閉しやすいファスナー式。
防水、抗菌、防臭機能付。



送風チューブ
コネクター方式なので着脱は
ワンタッチ。セッティングも簡
単です。



フィルター
内部と外部のダブル構造と
なっており、外部フィルター
は簡単に交換できます。

サイズ・商品詳細

ポンプ	定格: AC100V、8W、50/60Hz
	寸法: 幅31.5cm × 高さ15cm × 奥行10cm
	重量: 2.2kg
	外ケース材質: ABS樹脂(抗菌機能付)
マットサイズ (使用時)	寸法: 幅84cm × 長さ191cm × 厚み10cm
カバー	材質: ラミネート加工 ウレタンフィルム布(防水、抗菌、防臭)

必ずお読み下さい

※こちらの商品はリサイクル(中古)品です。
消毒・メンテナンスを実施しておりますが、状態は新品とは
異なりますので、ご注文の前に良くご検討ください。

■配送について

宅急便でお送りして、お客様にて組立(セッティング)をお願い致します。

■送料について

無料(離島・一部地域を除く)

■お支払いについて

- ・銀行振込(振込手数料は、お客様負担でお願い致します)
- ・郵便振込(弊社より専用の振込用紙をお送りします)

※ご入金確認後、発送致します。

■返品・交換について

商品到着後、1週間以内にお願ひ致します。

■保証期間について

ご購入の日から3ヶ月です。

お問い合わせ・ご購入をご希望される方は
『介護ネットプラザ』まで ご連絡下さい

電話・FAX・メールにて受付しております



介護ネットプラザ

お電話でのお問合せは フリーダイヤル

0120-78-1265

〒236-0021 横浜市金沢区泥亀2-7-3	
TEL	0120-78-1265
FAX	045-784-1266
E-mail	kaigonet@cream.plala.or.jp
営業日	月曜～土曜 9:00～17:00
定休日	日 曜 ・ 祝 日